

12/4/2020

Manual de usuario
Grupo de Investigación GIIRA



ERGOSENT



LEAP
MOTION



UNIVERSIDAD DISTRITAL



CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1.0	12 de abril de 2020	Grupo GIIRA	Versión inicial

Introducción

El siguiente artículo tiene como propósito dar a conocer a los usuarios finales y a los profesionales SST la forma de funcionamiento del software Ergosent.

Ergosent apoya el proceso de revisión de puestos de trabajo a partir de una evaluación ergonómica de los miembros distales superiores utilizando el dispositivo Leapmotion como sensor de captura y un motor de eventos que evalúa el riesgo postural según las normas ergonómicas internacionales de mayor aplicabilidad.

Requerimientos básicos (Usuario)

- Conexión a internet
- Dispositivo LeapMotion


Requerimientos básicos (Profesional SST)

- Conexión a internet
- Aplicación Power Bi Desktop (gratuita)

Aplicación

Instructivo para los usuarios a evaluar:


Para comenzar, abrir el archivo ejecutable ErgoSent

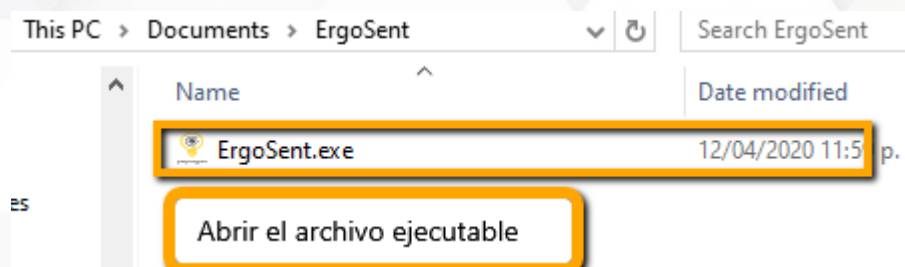


Ahora, verificar si ya se encuentra registrado en el aplicativo, si no se encuentra registrado, o no hay ningún usuario registrado. Hacer click en registrarse e ingresar los datos




ERGOSENT

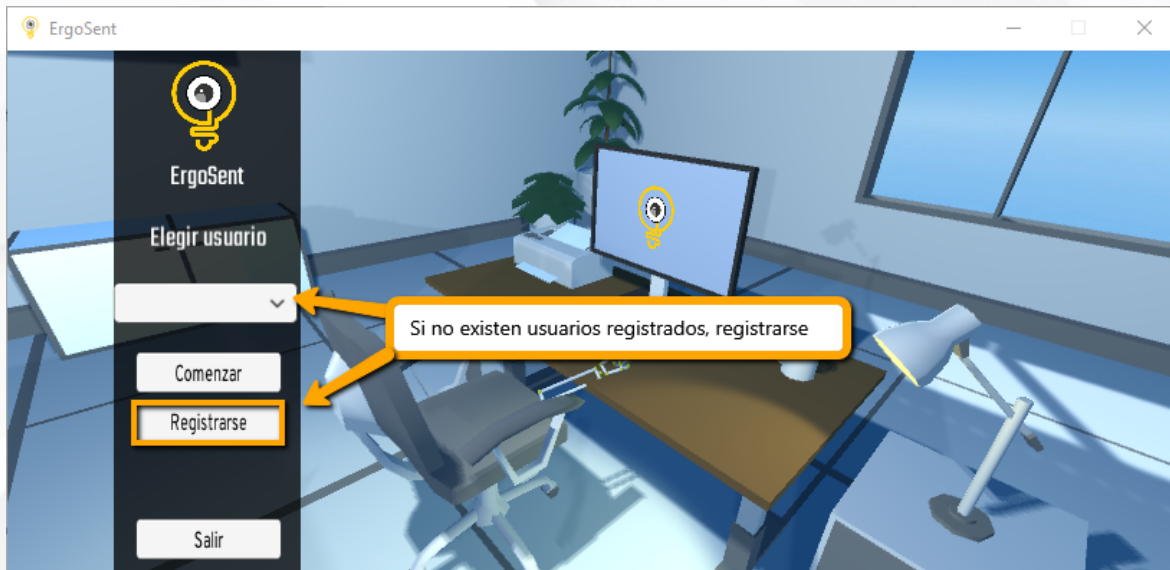


Ingresar datos para el registro

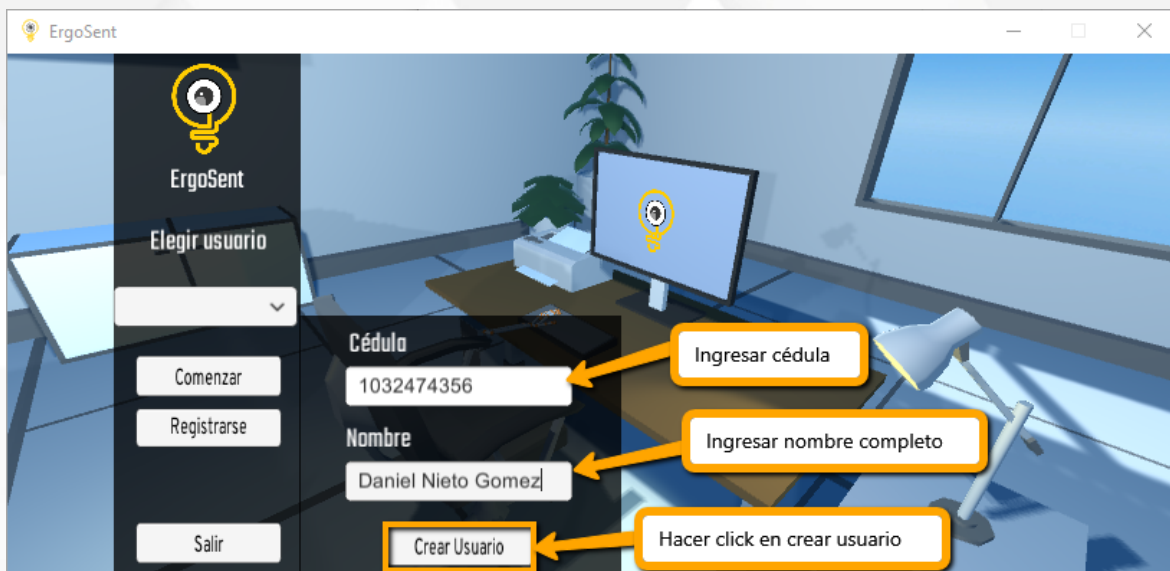

Seleccionar usuario e ingresar al aplicativo

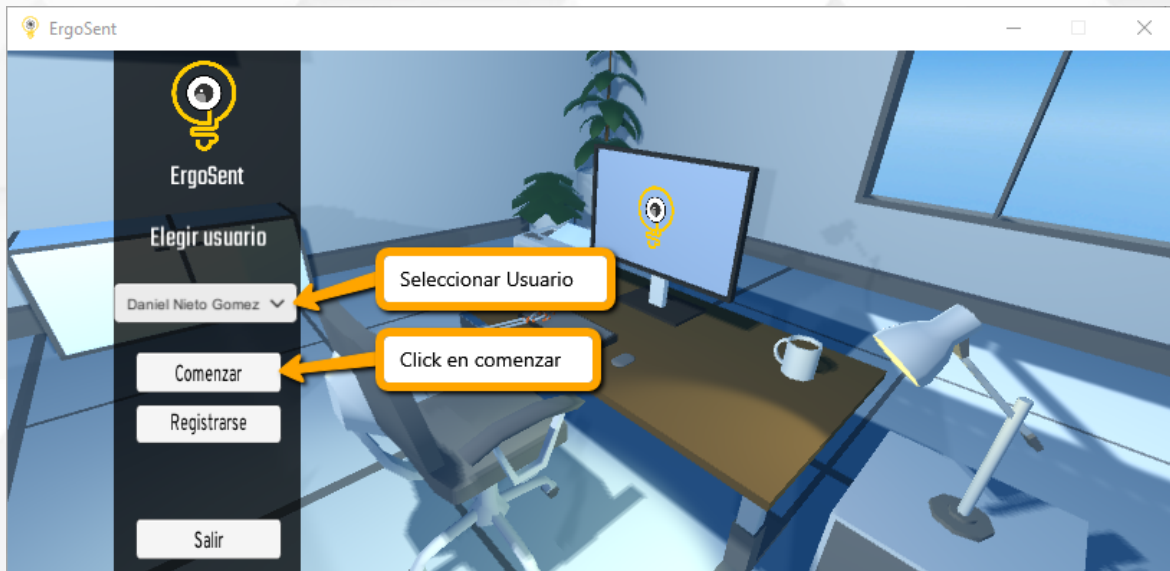


Una vez hecho el login, hacer click en iniciar

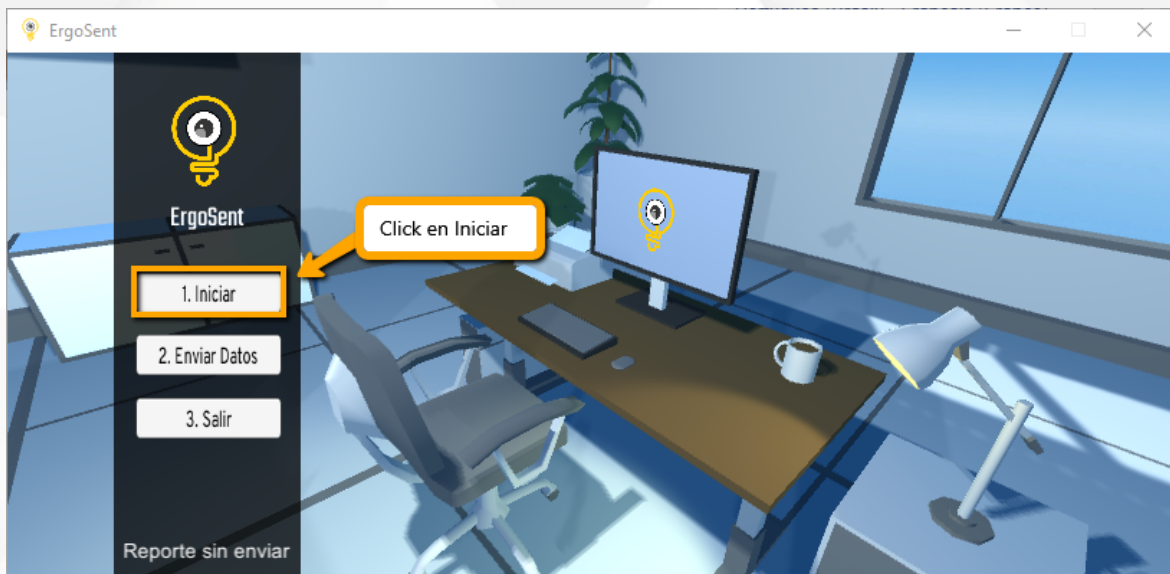


Ahora la aplicación se encuentra leyendo los datos y puede ser minimizada, cuando se quiera terminar la sesión. Presionar el botón finalizar sesión



Una vez terminada la sesión, hacer click para enviar en el botón 'Enviar Datos' para enviar los datos al profesional de salud y seguridad en el trabajo

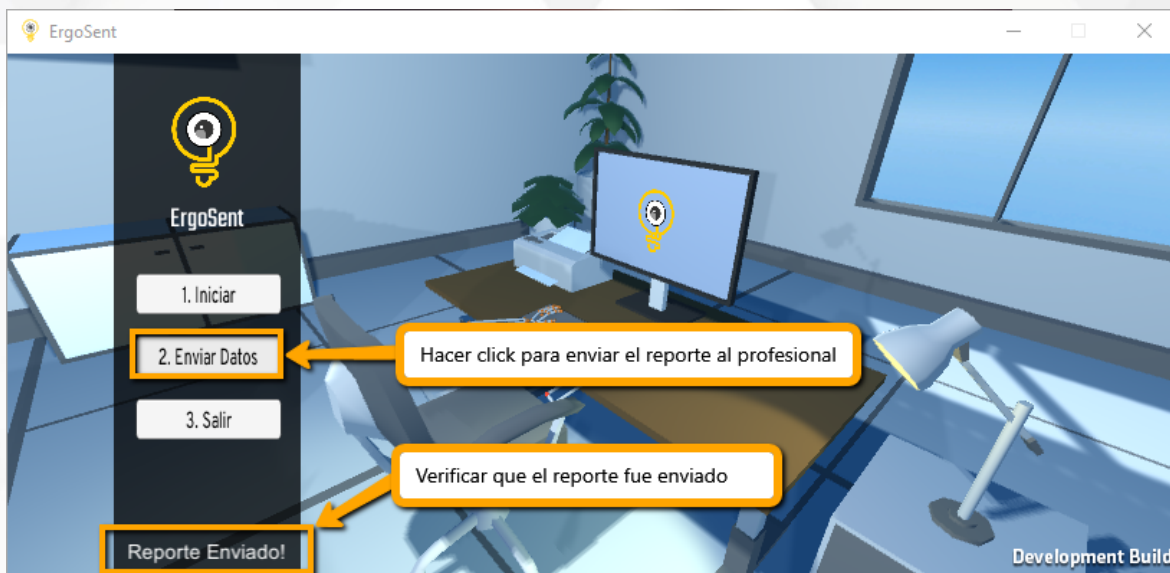


Finalmente, hacer click en el botón salir, o cerrar el programa para terminar.

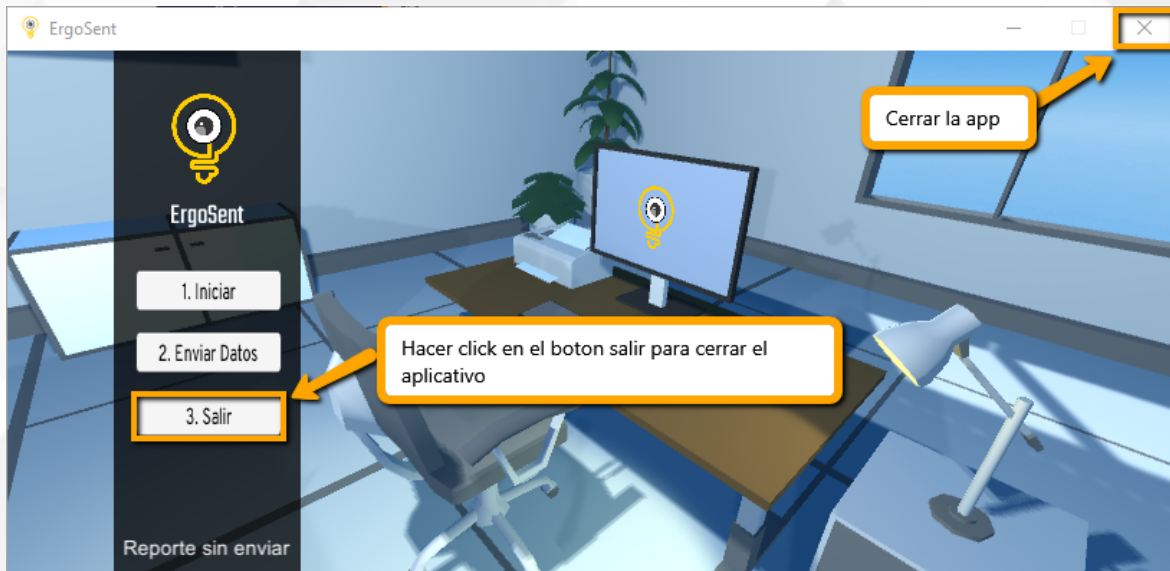


Instructivo para los profesionales SST

Abrir el reporte ErgoSent

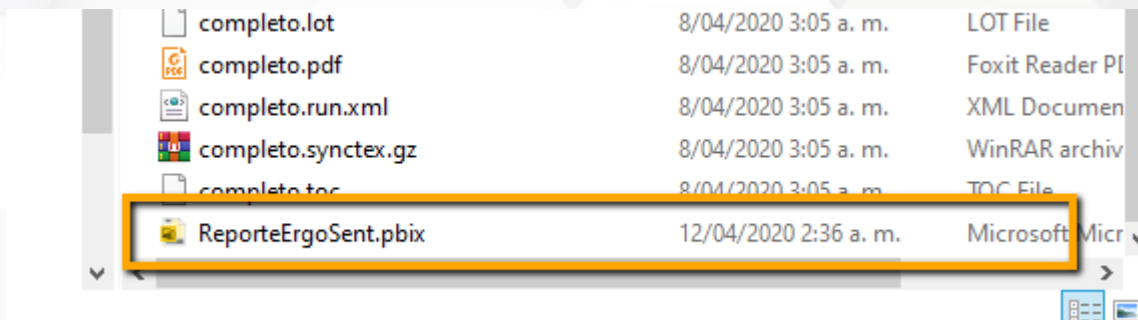


Si se necesita agregar un usuario nuevo, dar click en editar consultas.

Si se requiere solo actualizar los datos de los usuarios que ya se han agregado, hacer click en actualizar, omitir todos los pasos a continuación y evaluar el reporte de manera normal

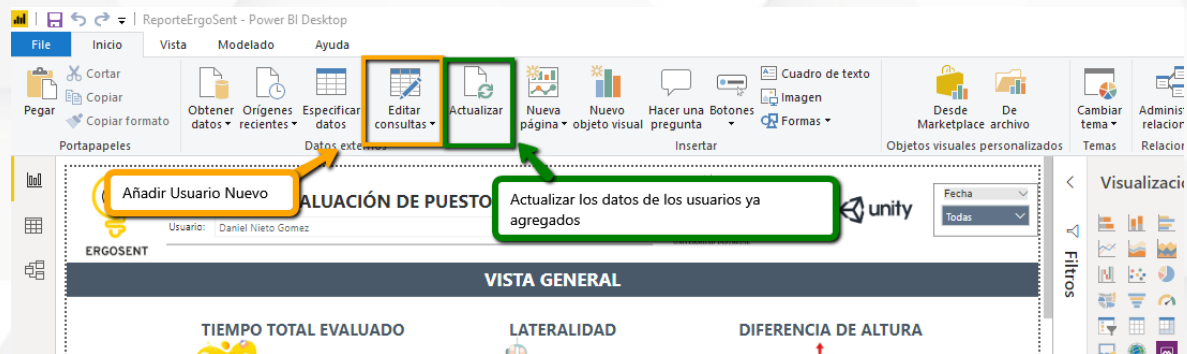


Hacer click en Nuevo Origen y luego en “Más...”

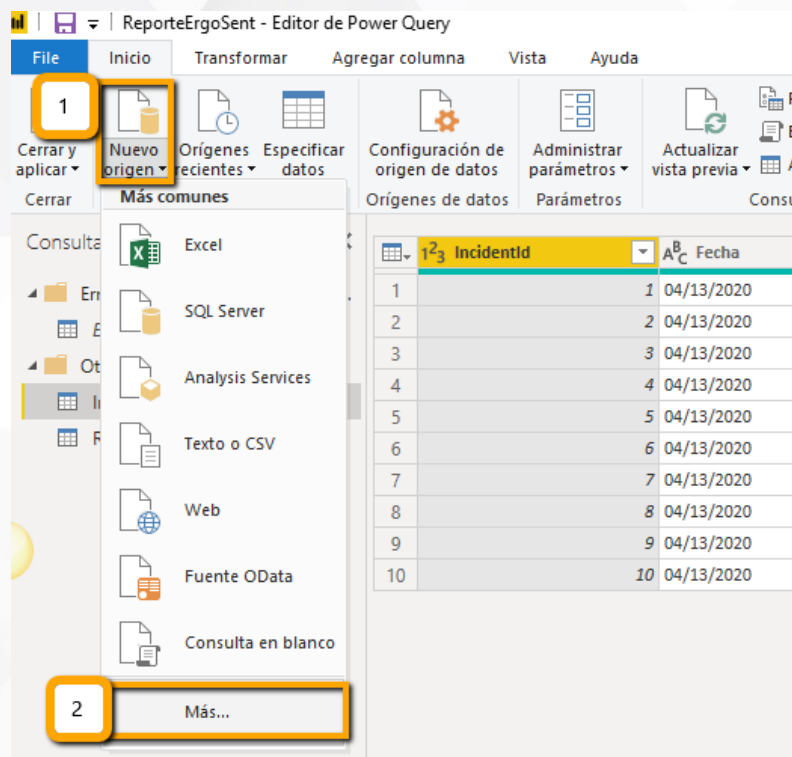




ERGOSENT


Elegir Azure blob storage

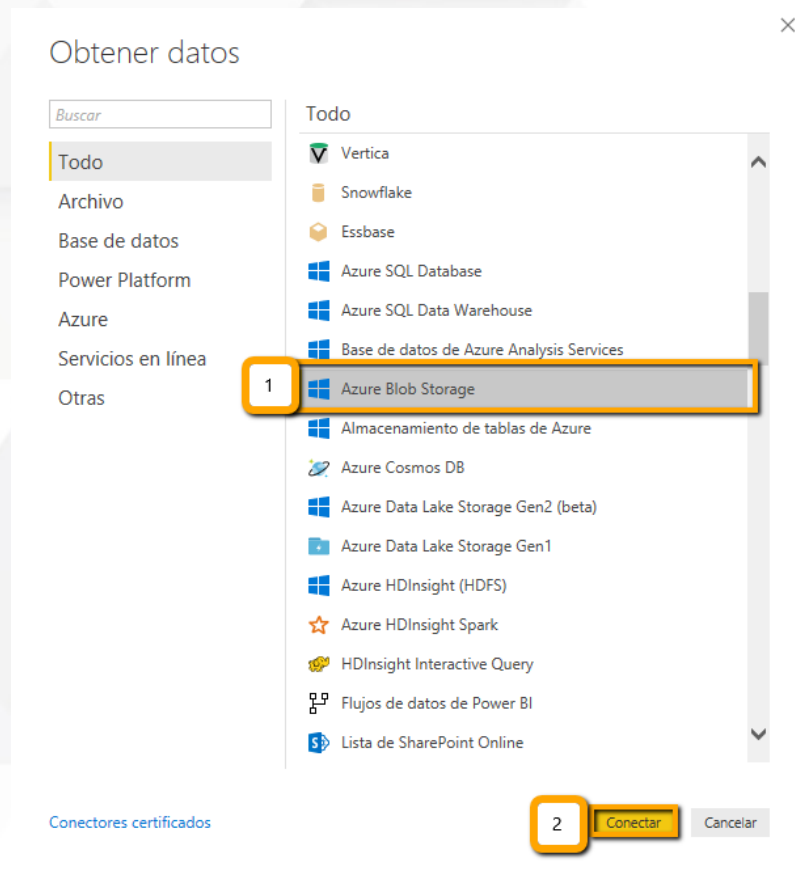


Ingresar ergosentblobs y dar click en aceptar

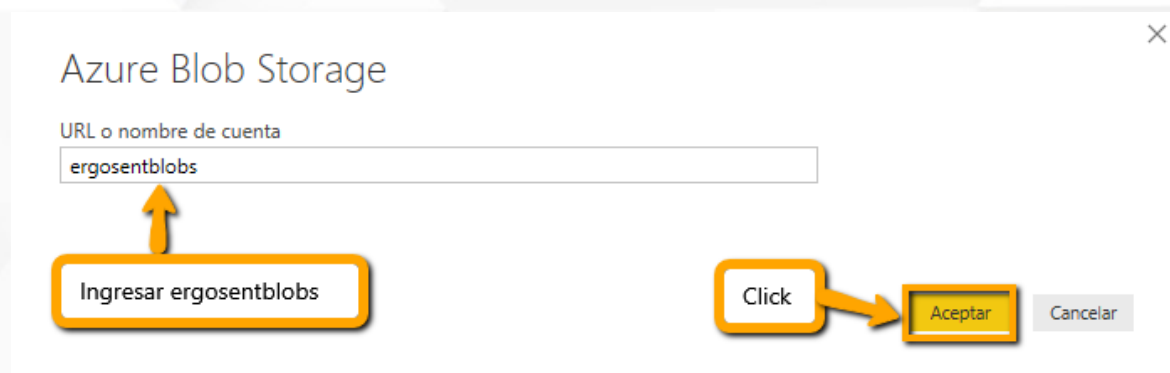

Activar la casilla que dice ergoblob y dar click en aceptar

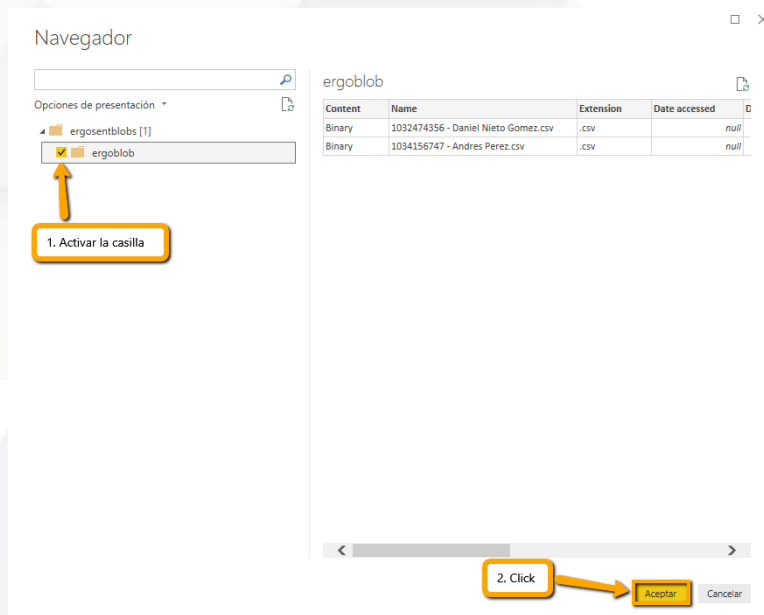

Click en “Binary” de la fila donde se encuentra el nombre del usuario a agregar al reporte. En este caso se agregará al usuario “Andres Perez”

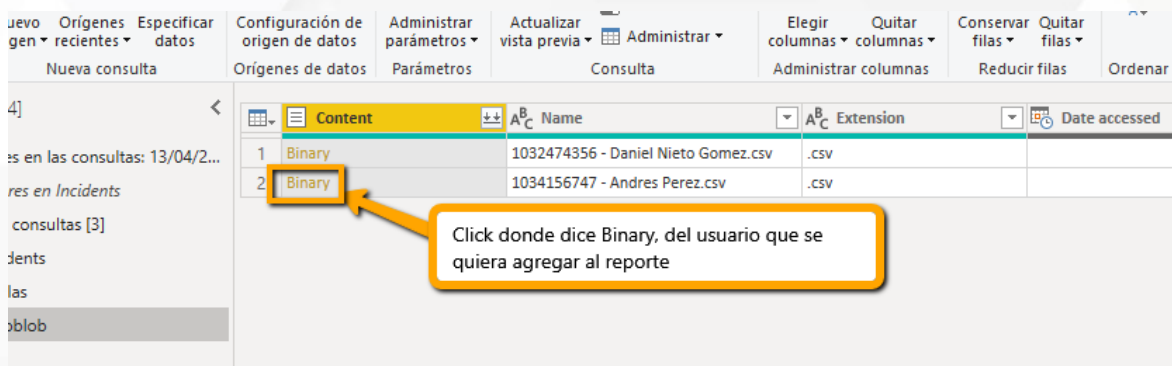



ERGOSENT

Hacer click derecho en la nueva consulta que apareció con nombre “ergoblob” y luego click en cambiar nombre

1

Errores en las consultas: 13/04/2...

Errores en Incidents

Otras consultas [3]

Incidents

Reglas

ergoblob

2

Copiar

Pegar

Eliminar

Cambiar nombre

Habilitar carga

Incluir en la actualización del informe

1		1 04/13/2020
2		2 04/13/2020
3		3 04/13/2020
4		4 04/13/2020
5		5 04/13/2020
6		6 04/13/2020
7		7 04/13/2020

Colocar el nombre del usuario que se quiere importar

Errores en Incidents

Otras consultas [3]

Incidents


Reglas

Andres Perez


Colocar el nombre del usuario a importar

2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11

Hacer click sobre la consulta “Incidents” en el panel de la izquierda, luego dar click en combinar, y finalmente click en anexar consultas

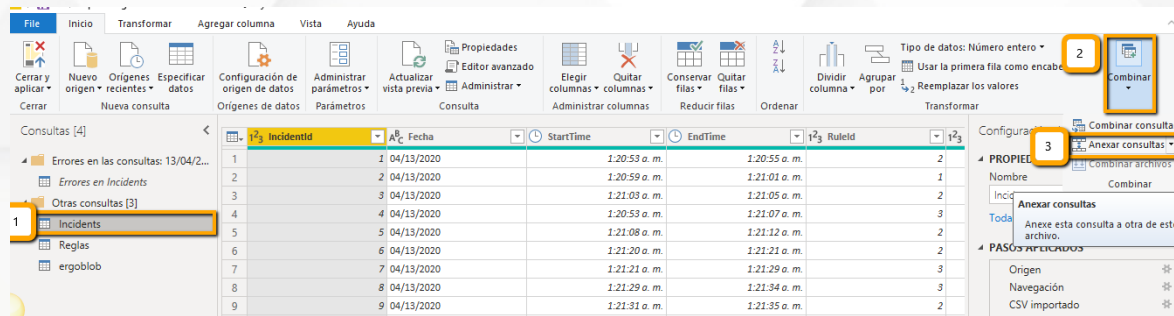

Luego, seleccionar la consulta que se acabó de renombrar. En este caso es “Andres Perez”, luego dar click en aceptar

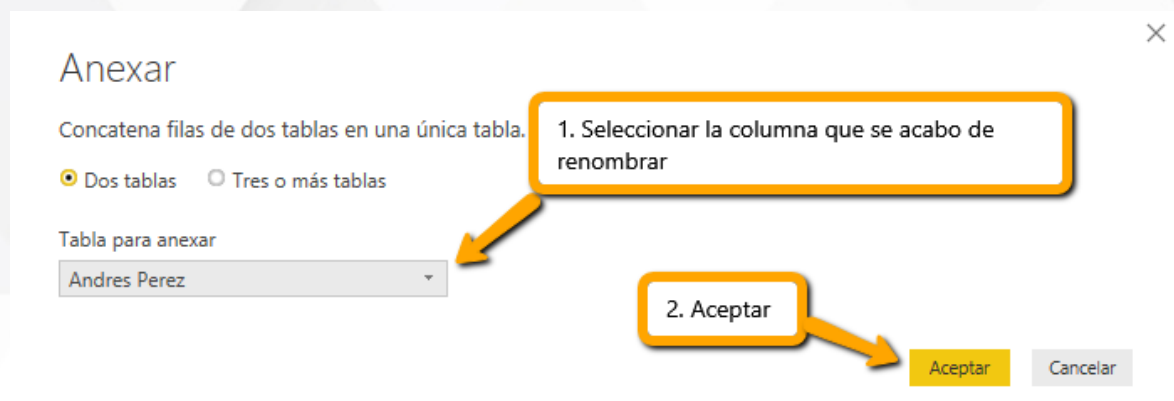



ERGOSENT

Luego, aparecerá un nuevo paso en el panel de la derecha en la parte de abajo con el nombre "consulta anexada". Dar click derecho en el último paso y luego click en subir. Se debe seguir dando click derecho -> subir hasta que el paso "Consulta anexada" quede debajo del paso "Encabezados Promovidos"

1:21:1.
1:21:2.
1:21:2.
1:21:3.
1:21:3.
1:21:3.
1:21:3.
1:20:5.
1:21:0.
1:21:0.
1:21:0.
1:21:1.
1:21:2.
1:21:2.

PASOS APLICADOS

- encabezados promovidos
- Tipo cambiado
- Columna duplicada
- Valor reemplazado
- Valor reemplazado1
- Valor reemplazado2
- Columnas con nombre ca...
- Personalizada agregada
- Hora extraída
- Columna duplicada1
- Consulta anexada

Editar configuración


- Cambiar nombre
- Eliminar
- Eliminar hasta el final
- Insertar paso después
- Subir
- Bajar
- Extraer anteriores
- Ver consulta nativa
- Propiedades...

1. Click derecho en Consulta anexada

2. Click en subir


3. Repetir el proceso hasta que el paso "Consulta anexada" quede debajo de "Encabezados Promovidos"

Así debe quedar después de aplicar el paso anterior

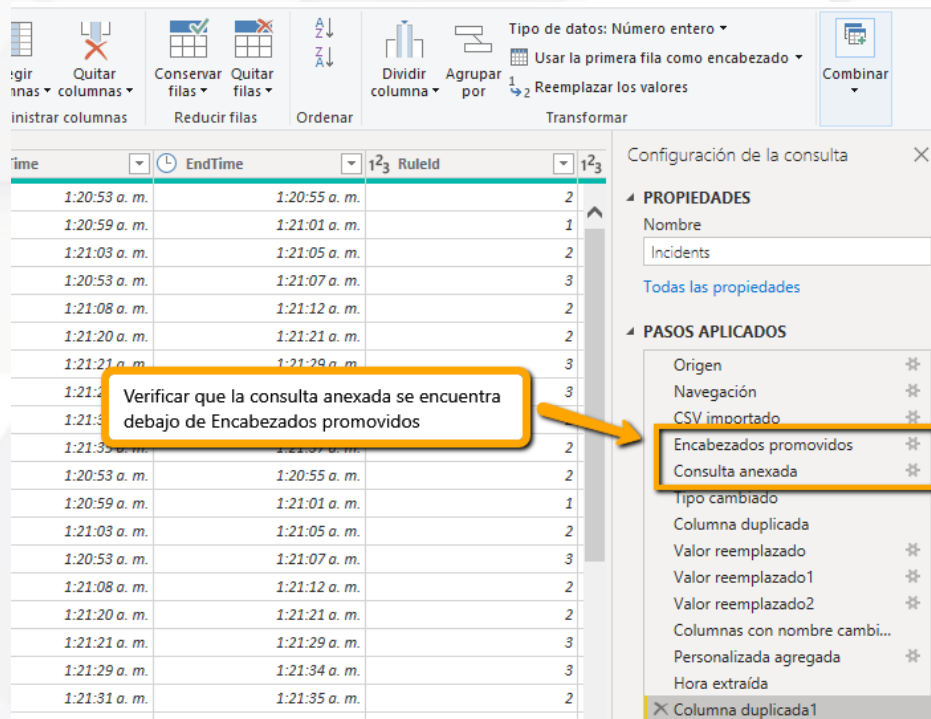


Verificar que la consulta anexada se encuentra debajo de Encabezados promovidos

Finalmente, hacer click en cerrar y aplicar

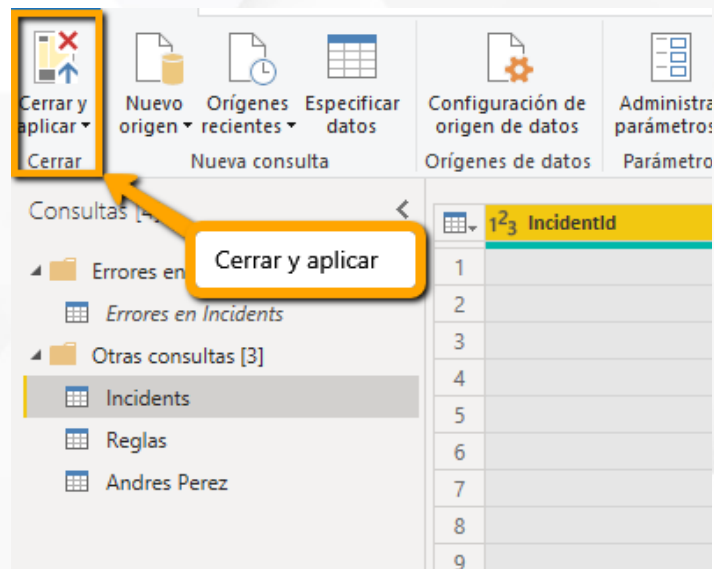

Cerrar y aplicar

Ahora ya se podrá consultar todos los datos relacionados a ese usuario. Seleccionar el usuario a consultar, y la fecha a evaluar

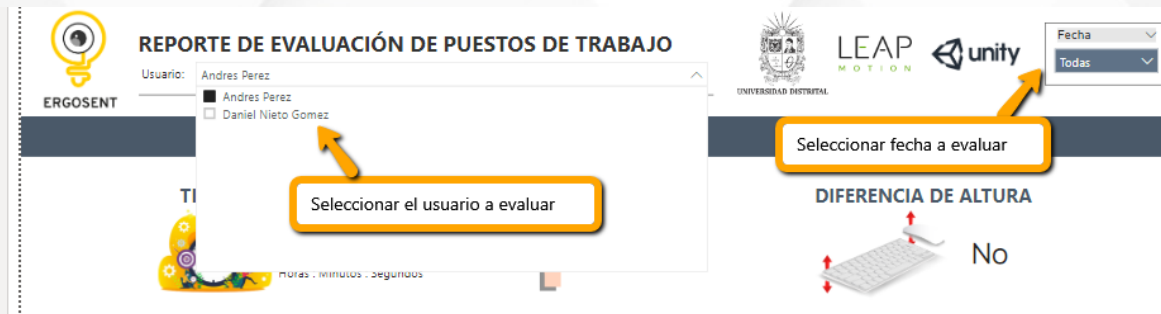

REPORTE DE EVALUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Usuario: Andres Perez

Fecha: Todas

Seleccionar el usuario a evaluar

Seleccionar fecha a evaluar

DIFERENCIA DE ALTURA

No

Ahora el proceso se encuentra terminado y se puede explorar el reporte. Este proceso de añadir el usuario solo se debe hacer una vez. Después solo se debe hacer click en el botón de actualizar



Para terminar, se debe guardar primero el reporte y luego cerrar el reporte

